

## UPORABNIŠKI PRIROČNIK

### ELEKTRONSKA TEHTNICA KOPALNICA DO 180 KG

## CS20F




#### Pozor!

1. Tehtnica se ne sme uporabljati za diagnozo ali zdravljenje nobenega medicinskega stanja. Vedno se posvetujte z zdravnikom, preden začnete s katerokoli dieto ali vadbenim programom.
2. Uporaba tega izdelka ni priporočljiva za osebe, ki so noseče, trpijo za osteoporozo, imajo srčni spodbujevalnik, umetne sklepe, prenosni EKG ali druge kovinske naprave. V tem primeru ga uporabljajte le za merjenje teže in obute čevlje, da se izognete pretoku elektrike, ko stopate na tehtnico.
3. Vsi podatki o telesni sestavi so le za referenco in ne smejo nadomestiti nasveta licenciranega zdravstvenega strokovnjaka.
4. Če tehtnica ne deluje pravilno, najprej preverite stanje baterije. Po potrebi zamenjajte baterije.
5. Pred vsako uporabo preglejte napravo. Ne uporabljajte aparata, če je poškodovan. Neprekinjena uporaba poškodovane tehtnice lahko povzroči poškodbe ali nenatančne rezultate.
6. Tehtnico shranite na suhem mestu. Bodite previdni pri uporabi lestvice na mokrih in spolzkih površinah.
7. Teža je občutljiva. Prosim, ravnajte previdno.
8. Ta tehtnica je natančna merilna naprava. Nikoli ne skači na tehtnico, ne stopaj nanjo ali je razgrajuj. Ravnajte z njim previdno, da ga ne poškodujete.
9. Tehtnica ni vodoodporna; Nikoli ne potaplaj luske v vodo. Za čiščenje površine uporabite vlažno krpo ali čistilo za vetrobransko steklo. Ne uporabljajte mila ali drugih kemičnih čistil.
10. Vedno postavite tehtnico na stabilno, ravno površino in poskrbite, da je tehtnica popolnoma mirna med tehtanjem.
11. Ko tehtnica ni v uporabi, nanjo ne polagajte težkih predmetov.
12. Tehtnica je namenjena izključno gospodinjiskim potrebam in ni primerna za medicinsko ali komercialno uporabo.
13. Da preprečite motnje in nevarnosti, naprave ne uporabljajte v bližini naprav, ki ustvarjajo močna elektromagnetna polja.
14. Pod nobenim pogojem ne smete poskušati razstaviti tehtnice.

#### KAKO UPORABITI:

##### Korak 1:

Pred uporabo pravilno vstavite 3 x 1,5V AAA baterije.

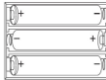


1. Vstavite AAA baterije glede na simbole polaritete (+ in -), označene znotraj embalaže.

2. Če se na zaslonu pojavi "Lo", zamenjajte baterije.

##### Korak 2:

Uporabite tehtnico na ravni, trdi površini. Izogibajte se preprogam in neenakomernim tlem

Pravilna meritev telesne maščobe in drugih parametrov telesne sestave: Stojte pokončno na tehtnici in se elektrod enakomerno dotaknite z obema stopaloma, kot je prikazano na spodnji sliki.

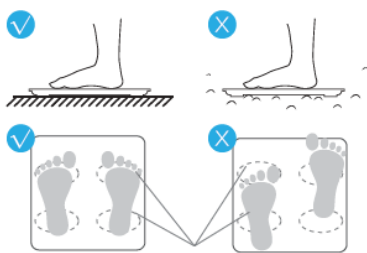

#### Nasveti za merjenje

Pozorno preberite opozorilo na prvi strani in sledite navodilom.

\* Ta izdelek uporablja tehnologijo BIA (analiza bioelektrične impedance). Za natančne in dosledne meritve ga uporabljajte ob istem času dneva in pod enakimi pogoji, kadar je mogoče. Meritve se je treba izogibati:- Med intenzivno vadbo ali takoj po intenzivni vadbi - Takoj po tuširanju, kopanju ali savni - Pri visokem uživanju alkohola - Med zamašenostjo ali takoj po njej,- Med vročino.

\*Med testom morate najprej stati bosi in stati pokončno. Pri čevljih ali nogavicah rezultati ne bodo natančni. Umazane noge lahko prav tako vplivajo na natančnost meritev.

\*Enote teže je mogoče spremeniti iz funta (lb) v kilogram (kg) in obratno z uporabo mobilne aplikacije. Enota višine se bo prav tako spremenila (od metra do čevlja/palca).

\*Pravilno izmerite svojo telesno težo: Tehtnico postavite ravno na trdo površino in jo pred merjenjem izničite. Preden stopite na tehtnico, naj bi pokazala 0,0 funta ali kilograma.


#### Prikaz merila:




| SIMBOL                  | RAZLAGA                                   | REŠITEV                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lo                      | Nizka baterija                            | Zamenjajte z novo 1,5V AAA baterijo                                                                                  |
| EEr                     | Prevelika obremenitev                     | Uporabite obremenitev manjšo od 180 kg                                                                               |
| EEr1                    | Nestabilna tla                            | Tehtnico ponovno postavite na ravno in trdo površino, ponovno izmerite                                               |
| ----                    | Nepravilna kalibracija                    | Tehtnico ponovno postavite na ravno in trdo površino ter ponovite kalibracijo                                        |
| No Display              | Brez napajanja / Samodejno izklopljanje   | Vklopite tehtnico ali zamenjajte baterijo                                                                            |
| Display Weight Only     | V aplikaciji ni popolnih podatkov profila | Brez uporabniških profilov: Odprite aplikacijo, odprite nov profil z odprto bluetooth povezavo. Stoj bos na tehtnici |
| Unable to Sync with App | Naredil povezavo ali izklopil tehtnico    | Za iPhone: omogočite avtorizacijo bluetooth<br>Za Android: Omogočite dovoljenja za lokacijo                          |

Elektronska tehtnica CS20F je analizator telesne teže, ki meri telesno težo in uporablja tehnologijo analize bioelektrične impedance (BIA) za oceno odstotka telesne maščobe in drugih podatkov o telesni sestavi. Aparat je namenjen izključno gospodinjstvu.

1. Osebe z vsadljivimi medicinskimi pripomočki te naprave ne bi smele uporabljati. • Vsadljive elektronske medicinske naprave, kot so srčni spodbujevalniki •, umetna srca in druga elektronska medicinska oprema. • Nosljiva elektronska medicinska oprema, kot je elektrokardiograf.
2. Do ne skočiti na napravo.
3. Meritve vsak dan ob istem času in pod enakimi pogoji.
4. To zagotovite natančnost meritev, prosim, postavite tehtnico na trdo in ravno površino.
5. Če je odstopanje od teže veliko, lahko poskusite ponovno namestiti baterijo.

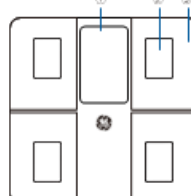

1. LED osvetljevalnik
2. Merilne elektrode
3. steklena osnova
4. Teža na nogah
5. Baterijski predal

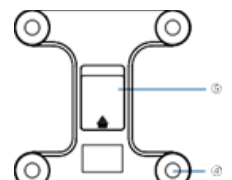



#### Vsečina embalaže

1. Pametna tehtnica
2. Uporabniški priročnik

#### Specifikacije

- ✓ Dimenzije: 11,02 x 11,02 x 1 palec (280 mm x 280 mm x 25,5 mm)
- ✓ Teža: 3,32b (1,51 kg)
- ✓ Največja teža: 400b/180kg
- ✓ Minimalna teža: 0,4 lb / 0,2 kg
- ✓ Napajalnik: 3 AAA baterije

#### Namestitev in merjenje aplikacije

Pametna tehtnica SC20F se lahko brezžično poveže z mobilnimi telefoni ali tablicami. Za to morajo mobilne naprave namestiti mobilne aplikacije. Najlažji način za prenos mobilne aplikacije je, da QR kodo skenirate s telefonom in nato sledite navodilom na zaslonu.

**Prednastavitev Korak 1: Prenesite aplikacijo "FeelFit" in ustvarite račun v Apple App Store (iOS) ali Google Play (Android), poiščite aplikacijo "FeelFit" in jo prenesite na svoj pametni telefon. QR kodo lahko tudi skenirate za prenos aplikacije.**




**Korak 2: Tehtnico povežite s pametnim telefonom. Registrirajte račun** Bluetooth na vašem telefonu vključite. QR KODA SE ZDI PRIMERNA. Po 8.0 in novejšin morate omogočiti tudi lokacijo. Parjenje se bo zgodilo samodejno. Na tehtnici se prikaže ikona Bluetootha.

**Ustvarite račun:** Odprite aplikacijo FeelFit in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje novega uporabniškega računa. Od vas bodo zahtevali, da posredujete osnovne osebne podatke, kot so vaš spol, starost, višina in raven aktivnosti. Te informacije so ključne za natančne izračune telesne sestave.

**Vključite Bluetooth:** Poskrbite, da je Bluetooth vklopljen na vašem pametnem telefonu.

#### Merilo kombiniranja:

- ✓ Stopi na tehtnico za trenutek, da jo aktiviraš. Zaslona bi moral svetiti.
- ✓ V aplikaciji FeelFit pojdite v razdelek za povezovanje naprav (običajno pod zavahkom "Naprave" ali "Moja teža").
- ✓ Aplikacija bi morala samodejno zaznati merilo CS20F. Izberi jo, da začneš pariti.
- ✓ Ko je povezava povezana, bo aplikacija potrdila povezavo.

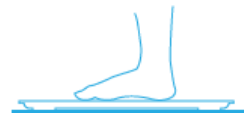

#### Odprite aplikacijo FeelFit, stopite na tehtnico s stopali

Izmerite. Aplikacijo imejte odprto na domačem zaslonu.

- ✓ Pritisni, da vklopiš tehtnico in počakaš, da se "CAL" vrne na "0.0"
- ✓ Stojte na tehtnici bosi in počakajte, da se znaki stabilizirajo
- ✓ Preveri meritve



Če številko dvakrat pokažemo na zaslonu, je meritev telesne teže popolna. Ko se svetlobna vrstica preneha premikati naprej in nazaj, so meritve telesne maščobe in telesne sestave popolne.



Če številko dvakrat pokažete, je test uteži končan. Stabilizacija števila 0 pomeni konec testa telesne maščobe.

#### Izjava o skladnosti

SK Production Poland sp z o.o. izjavlja, da je zadevni izdelek skladen z naslednjimi evropskimi direktivami in nacionalnimi izvedbenimi predpisi 2014/35/CE Direktiva o nizkih napetostih 2011/65/CE (RoHS) 2012/19/CE - 2003/108/CEE (WEEE) 2014/30/CE Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) EN 60730-2-6 EN 61000 4-3, EN 50562-1:2013-12 Učinkovitost uporaba frekvenčnih virov: EN 300 328 V2.2:2020-03, Elektromagnetna združljivost / EN 3.1 489-1 V2.2.3:2020-07, EN 301 489-3 V2.1:2019-10, Varnost uporabe EN 62368-1:2020-11+A11:2020-12 Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Uporaba je pogojena z naslednjima dvema pogojema: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Spremembe ali prilagoditve, ki jih oseba, odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje naprave. Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je, da ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B, v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v gospodinskih objektih. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo ter, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da motnje ne bodo prišle v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala, kar je mogoče preveriti z izklopom in vklopom naprave, je uporabnik spodbujen, da poskuša motnje odpraviti z enim ali več od naslednjih ukrepov: — Preusmerjanje ali premestitev sprejemne antene. — Povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom. — Priključite opremo na vtičnico na vezju, ki je drugačen od tistega, na katerega je priključen sprejemnik. — Posvetujte se s prodajalcem ali izkušen radijski in televizijski tehnik za pomoč. Naprava je bila testirana glede na izpolnjevanje splošnih zahtev glede RF izpostavljenosti. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih osvetlitve brez omejitev.

FCC ID: 2ANDX-CS20M

#### Pravilno odstranjevanje izdelkov

Izdelka ne odlagajte z drugimi gospodinskimi odpadki ob koncu njegove uporabne dobe. Da bi se izognili škodljivim vplivom nekontroliranega odlaganja odpadkov na okolje in zdravje ljudi, zahtevamo, da se izdelek loči od drugih vrst odpadkov in odgovorno reciklira, da bi spodbudili ponovno uporabo materialnih virov kot trajno prakso. Za informacije o tem, kje in kako ta izdelek reciklirati na okolju varen način, naj gospodinski uporabniki kontaktirajo prodajalno, kjer so kupili, ali lokalno oblast. Uporabniki v podjetjih naj kontaktirajo svojega dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Izdelek ne sme biti zavrnjen skupaj z drugimi komercialnimi odpadki.

#### Garancija in podpora

SC20F tehtnica telesne maščobe je zasnovana za vzdržljivost in natančnost. Namenjen je domači uporabi.

Prosimo, da za garancijo shranite dokazilo o nakupu.

Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa na maloprodajo na računu ali računu. Če izdelek v določenem obdobju pokaže napake, ga je treba vrniti distributerju/trgovini, kjer je bilo blago kupljeno, od koder je bilo kupljeno, s dokazilom o nakupu.

Če pride do napake, izdelek vrnite na:

**SK Production Poland sp z o.o. ul. Zapustna 42/7 02-483 Warszawa**

Garancijske zahteve je treba vložiti v času trajanja garancije. Pred kakršnim koli popravilom morate predložiti dokazilo o nakupu, svoje ime in naslov kraja nakupa. Zagotovite natančne podatke o napaki, ki jo je treba popraviti.

Vloge, oddane med garancijskim obdobjem, bo preveril SK Production Poland sp z o.o., da ugotovi, ali so napake povezane z materialom ali izdelkom izdelka. Stroški prevoza ne bodo kriti. Izdelek, ki ga je treba vrniti, je treba skrbno očistiti.

Prosimo, da izdelek pravilno in varno zapakiramo, da se med prevozom k nam ne poškoduje. Lahko zavrnemo zahteve za nepravilno dostavljene izdelke.

Vsa popravila bodo izvedena s strani SK production Poland sp z o.o. ali pooblaščenih agencij. Popravilo ali zamenjava izdelka ne podaljšata garancijskega obdobja.

Napake, za katere menimo, da jih krije garancija, bomo popravili brezplačno (razen stroškov prevoza) ali z zamenjavo z orodjem, ki deluje v popolnem stanju.

Orodje ali rezervni deli, za katere je bila izdana zamenjava, bodo postali last SK production Poland sp z o.o. Popravilo ali zamenjava izdelka v garanciji prinaša koristi, ki so dodatne in ne vplivajo na zakonske pravice potrošnika.

Garancijska doba je 12 msc

#### Garancija krije:

Popravilo izdelka (med garancijskim obdobjem), če je pogojen v skladu z zahtevami SK Production Poland sp z o.o. v povezavi z napakami, ki izhajajo iz materialnih napak ali napak, povezanih s proizvodnjo. Če nadomestni del ni več na voljo ali je umaknjen iz proizvodnje, ga SK Production Poland sp z o.o. nadomesti s funkcionalno zamenjavo.

#### Kaj garancija ne krije:

- obrabe in obrabe zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za delovanje
- nenamerne poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali zanemarjanja, malomarnega ravnanja ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
- uporabljajo izdelek za druge namene.
- ne spreminja ali spreminja izdelka na kakršen koli način.
- napake, ki nastanejo zaradi uporabe rezervnih delov in dodatkov, ki niso originalni elementi SK Production Poland sp z o.o.
- nepravilna namestitev (razen namestitve, ki jo je izvedla SK Production Poland sp z o.o.).
- popravila ali modifikacije, ki jih izvajajo osebe, ki niso iz servisnega centra SK Production Poland sp z o.o. ali pooblaščenih servisnih točk.
- zahtevki, ki niso povezani z napakami, ki jih zajema garancija za izdelek.